

TARTA DESIGN est né d'une évolution naturelle de la Cie DINO GALANTE qui a plus de 20 années d'expérience dans les sièges et systèmes de positionnement






NÉ D'UNE IDÉE, DÉVELOPPÉ COMME UNE SOLUTION

L'équilibre parfait entre une innovation brillante et ses utilisations sans fin.





TARTA ®

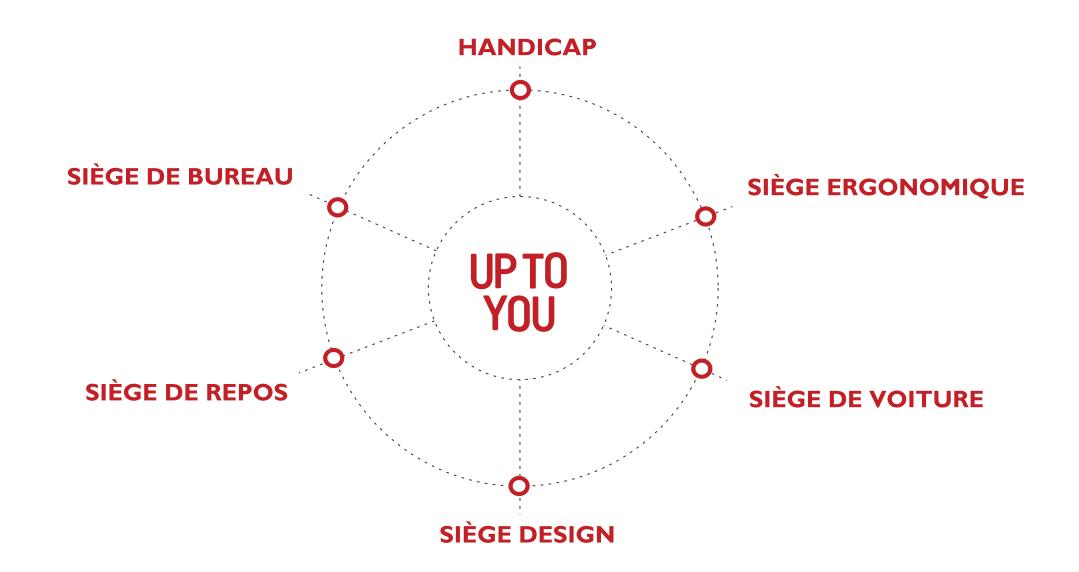







TARTA [®] TEAM





Stand REHA CARE 2010

ALC: NO DE COMPANY











PERSONNALISABLE







TARTA ®



- Les vertèbres sont fixées entre elles
- Les côtes sont fixées aux vertèbres

- Les coussinets sont fixés aux côtes
- Le poids varie de 600 gr à 1.500 gr





RÉGLAGES



Il est possible de régler l'inclinaison de chaque vertèbre de +/- 10 ° (en latéral). Exemple : on peut l'adapter à différentes scolioses

2

Chaque côte peut être réglée indépendament

3

Les côtes sont en aluminium et peuvent être ajustées selon la courbure voulue.







RÉGLAGES





La partie supérieure est flexible, et reproduit les mouvements naturels du corps

5 Les vertèbres basses peuvent être bloquées pour offrir un bon soutien lombaire

6 Les coussinets sont fixés aux côtes par velcro afin de faciliter les réglages





MATÉRIELS

LES PERFORMANCES DU MATÉRIEL

Tous les produits TARTA ont été étudiés et perfectionnés pour atteindre leur potentiel maximum.

L'acier utilisé au coeur des vertèbres permet de retenir en mémoire la position originale tout en acceptant la déformation et la fléxibilité.









MODÈLES











4 Vertèbres

- O Small (28 cm)
- O Medium (33 cm)
- O Large (38 cm)
- O Extra Large (43 cm)





5 Vertèbres

- O Small (28 cm)
- O Medium (33 cm)
- O Large (38 cm)
- O Extra Large (43 cm)



6 Vertèbres


- O Small (28 cm)
- O Medium (33 cm)
- O Large (38 cm)
- O Extra Large (43 cm)

- Largeur : S (28 cm) M (33 cm)
 L (38 cm) XL (43 cm)
- Les dossiers sont disponibles en différentes hauteur et largeur

- Il est possible de cintrer les côtes de +/- 2.5 cm par côté
- Hauteur : 4 à 6 vertèbres





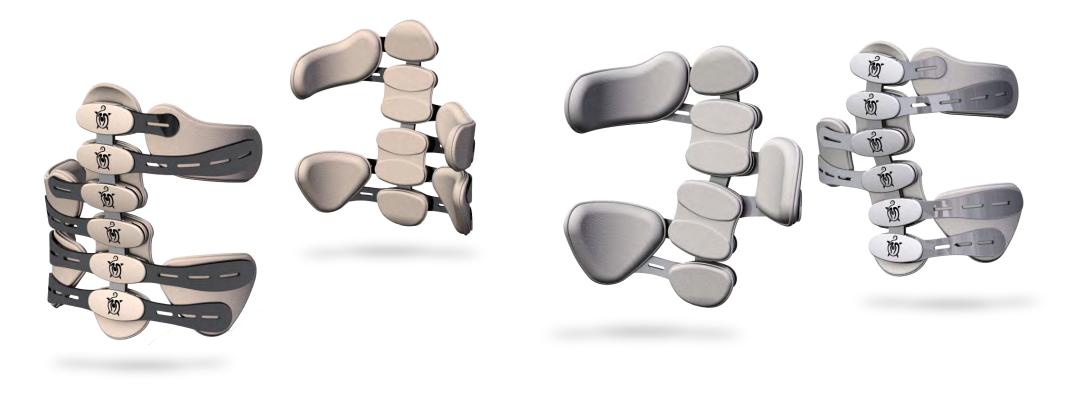

Les côtes peuvent être montées dans différentes positions afin d'obtenir un dossier personnalisé.





MONTAGE



Montage pour châssis rigide



Montage pour châssis pliant





Dossier avec le réglage lombaire pour lordose





Dossier avec réglage pour cyphose









REGARDER LE PRÉSENT PENSER AU FUTUR







THANK YOU REHABILITATION & DESIGN... FINALLY GOT MARRIED



